



**FICHAS COMERCIALES**

**COVER®**



# Soporte Muñeca-Codo / Elbow Wrist Support

CÓDIGO: SMC  
226

## Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. Su diseño abierto con abrojo permite una regulación acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambos brazos.

## Tallas

Tallas
Única - Regulable Unisex

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



## Composición

- Interior: Policloropreno 100 %
- Exteriores: Poliamida 100 % - Laminado / Mercerizado 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Ubicar la banda en la muñeca/codo quedando el logo de COVER en la parte interna.
2. Introducir la banda por el regulador.
3. Ajustar el velcro hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Contusiones
- Esguinces
- Distensiones
- Debilidad muscular
- Dolores reumáticos
- Tendinitis
- Inflamación tendinosa
- Artritis de muñeca

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





# Muñequera Regulable / Adjustable Wristband

CÓDIGO: MUR  
504 - 511

## Descripción y modo acción

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. Su diseño abierto universal permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas, la cual puede ir variando durante el tratamiento. Abarca desde la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos.

## Tabla de medidas

Tallas	Presentaciones
Única - Regulable Unisex	Derecha - Izquierda

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



## Composición:

Interior: Policloropreno 100%

Exterior: Poliamida 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Despegar el velcro
2. Introducir el pulgar por el orificio de la muñequera.
3. Tomar el lado más corto de la muñequera y rodear la muñeca hasta el punto máximo de extensión.
4. Tomar la tira de ajuste, rodear la muñeca pegar el velcro.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Contusiones
- Esguinces
- Distensiones
- Debilidad muscular
- Dolores reumáticos
- Tendinitis
- Inflamación tendinosa
- Artritis de muñeca
- Tenosinovitis
- Síndrome del túnel carpiano
- Artrosis

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



# Muñequera de potencia / Power Wristband

CÓDIGO: MUP

160-153-139

## Descripción y modo de acción

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca y codo se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada sobre la zona. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su diseño tubular brinda una contención segura, mientras que el abrojo permite una regulación acorde al tratamiento necesario. Puede utilizarse en ambos brazos.

## Tabla de medidas

Según contorno de la muñeca:

Tallas	(cm)
<b>SMALL (S)</b>	<b>15 cm - 17 cm</b>
<b>MEDIUM (M)</b>	<b>18 cm - 20 cm</b>
<b>LARGEX (L)</b>	<b>21 cm - 23 cm</b>

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar con jabón o detergente suave. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



## Composición

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%

## Instrucciones de Uso

1. Despegar el velcro
2. Introducir la mano a través de la muñequera, hasta que la misma quede colocada en la muñeca.
3. Ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Contusiones
- Esguinces
- Distensiones
- Debilidad muscular
- Dolores reumáticos
- Tendinitis
- Inflamación tendinosa
- Artritis de muñeca

## Empaque

<b>Envase</b>	Caja
<b>Cantidad</b>	1 par
<b>Color</b>	Negro
<b>Industria/Origen</b>	Arequipa /Perú

## Codera Regulable / Adjustable Elbow Pad

### Descripción y modo accion

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. Mediante la estabilización del codo, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. La banda de ajuste con abrojo, aporta fuerzas adicionales de compresión para proteger el tejido que recubre los músculos y limitar la progresión de la lesión. Puede ser utilizada en ambos codos.

### Tabla de medidas

Según contorno del brazo:

Tallas
Única - Regulable Unisex

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar con jabón o detergente suave. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: CRG  
719

### Composición

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%

### Instrucciones de Uso

1. Despegar el velcro.
2. Introducir el brazo a través de la codera. El codo debe ubicarse en la parte media
3. La banda de ajuste debe quedar en la zona del brazo y antebrazo
4. Ajustar el velcro hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar al médico.

No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

### Patologías

- Miositis
- Bursitis
- Artritis
- Lesiones inflamatorias
- Esguinces leves
- Inestabilidad articular

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Codera Airprene

CÓDIGO: CAI

016-023-030-179

### Descripción y modo accion

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones, y aplicación de calor terapéutico a la articulación promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede ser utilizada en ambos codos.

### Tabla de medidas

Según contorno del brazo:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	22 cm - 25 cm
MEDIUM (M)	26 cm - 29 cm
LARGEX (L)	30 cm - 33 cm
X-LARGE (XL)	34 cm a más

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Para un mayor ajuste, se recomienda adquirir la talla cercana al rango superior

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar con jabón o detergente suave. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

### Instrucciones de Uso

- 1.Introducir el brazo a través de la codera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla en medio del codo.
- 2.Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica , es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar al médico.

No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

### Patologías

- Miositis
- Bursitis
- Artritis
- Lesiones inflamatorias
- Esguinces leves
- Inestabilidad articular

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú

## Faja Reductora / Adjustable Girdle

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte, calor terapéutico y compresión a la zona media y baja del tronco, contribuyendo a estabilizar la columna. El ajuste regulable y peso ligero lo hace ideal para utilizar durante la práctica deportiva. Su sistema de cierre con velcro permite regular el producto adaptándose a las diferentes necesidades y anatomías del usuario. Elaborada en Neoprene hipoalergénico, material de alta elasticidad, resistencia y durabilidad.

### Tallas

Según contorno del abdomen:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	63 cm - 83 cm
MEDIUM (M)	69 cm - 89 cm
LARGEX (L)	75 cm - 95 cm
X-LARGE (XL)	81 cm - 101 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Las medidas son de producto en uso.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar con jabón o detergente suave. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO : FRN

399-405-412-429

### Composición:

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%

### Instrucciones de Uso

1. Despegar el velcro
2. Colocar la faja alrededor del abdomen.
3. Ajustar el velcro y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

El ajuste correcto, es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Inserto / bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú

# Gemelera Airprene / Airprene Cufflinks

## Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y ca. terapéutico a la pantorrilla, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, manteniendo la pantorrilla en una posición neutra, ayudando a prevenir distensiones, inflamaciones y desgarros. Su diseño tubular brinda una contención uniforme a toda la pantorrilla y se adapta a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas piernas.

## Tabla de medidas

Según contorno de la pantorrilla:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	31 cm - 34 cm
MEDIUM (M)	35 cm - 38 cm
LARGEX (L)	39 cm - 42 cm
X-LARGE (XL)	43 cm - 45 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Para un mayor ajuste, se recomienda adquirir la talla cercana al rango superior

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: GEA

849-856-863-870

## Composición:

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie a través de la gemelera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla sobre la pantorrilla.
2. Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica , es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Laxitudes ligamentosas
- Distensiones ligamentosas
- Tendinitis y tendinosis
- Desgarros

## Empaque

Envase	Inserto /bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Azul Cobalto
Industria/Origen	Arequipa - Perú





# Muslera Airprene / Airprene Legguards

CÓDIGO: MUA

801-818-825-832

## Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Mantienen a los músculos del muslo en una posición neutra. Su diseño tubular brinda una contención uniforme a todo el muslo y se adapta a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas piernas.

## Tabla de medidas

Según perímetro del muslo:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	48 cm - 52 cm
MEDIUM (M)	53 cm - 57 cm
LARGEX (L)	58 cm - 62 cm
X-LARGE (XL)	+63 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Para un mayor ajuste, se recomienda adquirir la talla cercana al rango superior

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



## Composición:

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie a través de la muslera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla sobre el muslo
2. Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica , es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea. Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico. No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Dolores musculares
- Lesiones tendinosas
- Distensiones
- Desgarros
- Contracturas de cuádriceps, abductores y femorales

## Empaque

Envase	Inserto/ bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Azul Cobalto
Industria/Origen	Arequipa - Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





# Tobillera Airprene / Airprene Ankle brace

CÓDIGO: TOA

344-351-368-117

## Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Su diseño cerrado y tubular ofrece contención pareja en toda la articulación. Aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, se logra el alivio de distensiones, ayuda a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

## Tabla de medidas

Según circunferencia del tobillo:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	19 cm - 21 cm
MEDIUM (M)	22 cm - 24 cm
LARGEX (L)	25 cm - 27 cm
X-LARGE (XL)	+28 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Para un mayor ajuste, se recomienda adquirir la talla cercana al rango superior

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



## Composición:

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie en la tobillera.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea. Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico. No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Esguinces
- Inestabilidad
- Tendinitis
- Síndrome del túnel tarsal
- Afecciones ligamentarias
- Contusiones
- Distensiones
- Esguinces leves
- Hinchazón

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Azul Cobalto
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Tobillera Regulable / Adjustable Ankle brace

CÓDIGO: TRG  
696

### Descripción y modo de acción

Contribuye a una la desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de una compresión leve que mantiene la articulación en una posición neutra, y calor terapéutico a la articulación. Su diseño completamente abierto permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición:

- Interior :Policloropreno 100 %
- Exterior:Poliamida 100 %- Laminado / Mercerizado 100%

### Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie a través de la tobillera.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Cruzar el velcro en la parte posterior del tobillo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Síndrome del túnel tarsal - o síndrome del túnel tarsiano o neuralgia del nervio tibial posterior-
- Pie cavo varo, recto o valgo
- Pie cavo anterior o posterior
- Esguinces
- Inestabilidad
- Pie zambo
- Inestabilidad crónica del tobillo
- Luxaciones
- Afecciones

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa -Perú



## Tobillera Regulable Airprene / Airprene Adjustable Ankle brace

CÓDIGO: TRG  
231

### Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de una compresión leve, mantiene la articulación en una posición neutra. Brinda calor terapéutico a la articulación. Su diseño abierto permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Composición

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie a través de la tobillera.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Cruzar la tira con velcro en la parte posterior del tobillo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Esguinces
- Inestabilidad
- Tendinitis
- Síndrome del túnel tarsal
- Afecciones ligamentarias
- Contusiones
- Distensiones
- Esguinces leves
- Hinchazón

### Empaque

<b>Envase</b>	<b>Inserto / bolsa</b>
<b>Cantidad</b>	1 unidad
<b>Color</b>	Azul Cobalto
<b>Industria/Origen</b>	Arequipa - Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Rodillera de Impacto (Meñisquera) / Impact Knee Brace (little band)

CÓDIGO: ROI  
618

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte a la rótula, posicionándola en su lugar natural. Mediante compresión patelar, ejerce presión sobre el tendón, con el objetivo de descargar la tensión acumulada. Ayuda a la centralización de la rótula cuando la rodilla se flexiona o extiende, evitando posibles lesiones. Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico. Su peso ligero y ajuste regulable conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Composición

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % -Laminado / Mercerizado 100%

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros.
2. Colocar en la rodilla.
3. Ajustar el sistema velcro según necesidad y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea. Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico. No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Tendinitis rotuliana
- Rodilla del saltador

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa /Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



## Rodillera Regulable / Adjustable knee brace

### Descripción y modo de acción

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El diseño abierto con sistema de ajuste con abrojos permite una fácil y rápida colocación del producto, además de un mayor ajuste, adaptándose a las diferentes anatomías, necesidades del usuario y distintos niveles de ajuste según el tratamiento indicado. Su peso ligero conforma un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable
Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: RRE  
702

### Composición:

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%

### Instrucciones de Uso

1. Desabrochar los velcros.
2. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula.
3. Ajustar los velcros según su necesidad y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Contusiones
- Desorden patelofemoral leve
- Distensiones
- Esguinces leves
- Inflamación
- Tendinitis patelar

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



# Rodillera Airprene / Airprene Knee Brace

CÓDIGO: ROA

148-313-320-337-733

## Descripción y modo de acción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. La apertura rotuliana cuenta con una almohadilla de refuerzo que ayuda a mejorar la contención y estabilidad de la rótula, brindando soporte durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada a la zona, y más puntualmente alrededor de la rótula por medio de la almohadilla. Ayuda a mantener la articulación en una posición neutra, con un mayor nivel de contención. Puede utilizarse en ambas rodillas.

## Tabla de medidas

Según perímetro 5 cm sobre el muslo:

Tallas	(cm)
X - SMALL (XS)	36 cm a menos
SMALL (S)	37 - 39 cm
MEDIUM (M)	40 - 42 cm
LARGEX (L)	43 - 45 cm
X - LARGE (XL)	+ de 46 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. Para un mayor ajuste, se recomienda adquirir la talla cercana al rango superior

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



## Composición:

- Interior: Poliéster SP 82% -Poliéster 75D 18% , calibre A8
- Exterior: Poliamida 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Introducir el pie dentro de la rodillera.
2. Deslizar hacia arriba, hasta que el orificio se encuentre sobre la rotula
3. Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica , es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea. Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico. No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Artrosis
- Artritis
- Contusiones
- Desorden patelofemoral leve
- Distensiones
- Esguinces leves
- Tendinitis

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Azul Cobalto
Industria/Origen	Arequipa -Perú



## Rodillera Articulada Cerrada / Closed Articulated Knee Brace

CÓDIGO: RAC  
146-155-177

### Descripción y modo de acción

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. Cuenta con bisagras biomecánicas de PVC con doble punto de apoyo a ambos lados, las que limitan el desplazamiento lateral de la rodilla. La apertura rotuliana con refuerzo y las cintas de ajuste regulable mejoran la contención y estabilidad de la rótula, brindando soporte durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su sistema tubular con abrojos permite regular el ajuste del producto acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambas rodillas.

### Tabla de medidas

Según perímetro 5 cm sobre el muslo:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	39 cm - 41 cm
MEDIUM (M)	42 cm - 44 cm
LARGEX (L)	45 cm - 47 cm
X-LARGE (XL)	+48 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición:

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%
- Bisagras de PVC 100%

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros
2. Introducir el pie dentro de la rodillera.
3. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula
4. Ajustar los velcros según necesidad y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Subluxaciones de rótula
- Artritis rótulo femoral
- Subluxaciones de rótula
- Torceduras
- Inestabilidades medio laterales
- Post operatorio
- Distensiones
- Esguinces
- Hematoma
- Tendinitis patelar

### Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú





## Rodillera Articulada Abierta / Open Articulated Knee Brace

### Descripción y modo de accion

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. Controla el movimiento y otorga límites de flexión, extensión a la rodilla y desplazamiento lateral de la articulación. Cuenta con dos bisagras biomecánicas de aluminio con doble punto de apoyo, topes que se ubican dentro de los límites naturales y adecuados para una recuperación óptima. La apertura rotuliana brinda comodidad de uso, y la almohadilla circular mantiene a la rótula en una posición neutra. Su sistema con abrojos permite regular el ajuste del producto acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambas rodillas.

### Tabla de medidas

Según perímetro 5cm sobre el muslo:

Tallas	(cm)
S/M	38 cm - 44 cm
L/XL	45 cm - 51 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: RAA

184-702

### Composición:

- Interior: Policloropreno 100%
- Exterior: Poliamida 100 % / Laminado - Mercerizado 100%
- Ferulas de Aluminio 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros
2. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula.
3. Ajustar los velcros según necesidad y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

### Patologías

- Subluxaciones de rótula
- Torceduras
- Inestabilidades medio laterales
- Post operatorio
- Distensiones
- Esguinces
- Hematoma
- Tendinitis patelar

### Empaque

Envase	Inserto/ Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



# Cabestrillo de clavícula / clavicle sling

CÓDIGO: CCL  
414

## Descripción y modo de acción

Almobiliza hombro y brazo, permitiendo una correcta y pronta recuperación. Disminuye los movimientos de abducción, rotación y antepulsión. Cuenta con dos piezas: un cabestrillo que sostiene el antebrazo, y una faja, para sostener el brazo cerca del tronco e impedir que éste se mueva lateralmente. Se utiliza en casos de reposo absoluto de la articulación glenohumeral. El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación escapulohumeral, además de producir la descarga de la articulación del hombro, dejándola en reposo para una correcta recuperación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. Las tiras regulables sobre los hombros cuentan con cintas que permiten ajustar el producto a la altura deseada, los abrojos brindan firme sujeción de las mismas sobre el cabestrillo. Esto permite adaptar el producto a diferentes usuarios y otorgarle el ajuste adecuado para cada tratamiento. Puede utilizarse en ambos brazos

## Tabla de medidas

Tallas	(cm)
Única	

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



## Composición

- Interior: Algodón 100% y Espuma Poliéster 100 %

## Instrucciones de Uso

1. Desabrochar todos los abrojos.
2. Regular el largo de las tiras mediante los pasadores.
3. Introducir el brazo a inmovilizar a través del cabestrillo.
4. Pasar las tiras del cabestrillo sobre el pecho y luego por la espalda. Cruzarlas y pasarlas por debajo de los brazos hasta abrochar el abrojo de las tiras en la parte baja del cabestrillo.
5. Colocar la faja alrededor del tronco, por debajo del brazo libre, por encima del brazo a inmovilizar y sobre el cabestrillo.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

## Advertencias y Recomendaciones

El tiempo de uso del producto, debe prescribirlo el médico. Si se observan problemas de irritación de la piel o sensibilización, retirarlo y consultar al médico.

## Patologías

- Fracturas subcapitales de húmero
- Fracturas de clavícula
- Luxaciones acromioclaviculares
- Traumatismos de hombro y brazo
- Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- Luxaciones de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- Subluxaciones de la articulación escapulohumeral

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa -Perú



# Cabestrillo Acolchado/ Orthopedic Sling

CÓDIGO: COR

131-054-061-047-757

## Descripción y modo de acción

Su soporte completo brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. Contiene y estabiliza la articulación del hombro, además de aliviar la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. Cuenta con dos tiras regulables, una pasa por detrás de la espalda y otra sobre el hombro, que junto a su sistema de cierre con abrojos permiten ajustar el producto a la altura deseada según las necesidades del usuario. El soporte acolchado, alivia las presiones generadas por el peso del brazo. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



## Tabla de medidas

Según el largo del antebrazo:

Tallas	(cm)
X-SMALL (XS)	25 cm - 30 cm
SMALL (S)	30 cm - 35 cm
MEDIUM (M)	35 cm - 40 cm
LARGE (L)	40 cm - 45 cm
X-LARGE (XL)	45 cm - 50 cm



\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Composición

- Interior: Algodón 100% y Espuma Poliéster 100 %
- Exteriores: Poliéster 100%

## Instrucciones de Uso

1. Coloque el brazo dentro del cabestrillo
2. Pase una de las correas sobre el hombro contrario y la otra rodeando el torso a la altura de la cintura.
3. Ajuste las correas para proporcionar mejor fijación.

## Advertencias y Recomendaciones

No hay contraindicaciones, no se han reportado observaciones.

## Patologías

- Luxaciones y sub-luxaciones
- Fracturas
- Inflamación

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Azul
Industria/Origen	Arequipa - Perú

# Cabestrillo Profesional / Professional Sling

## Descripción y modo de acción

Brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. Alivia la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. De simple y rápida colocación. Cuenta con dos tiras regulables, una pasa por detrás de la espalda y otra sobre el hombro, junto a su sistema de cierre con abrojos, permiten ajustar el producto a la altura deseada según las necesidades del usuario. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe




CÓDIGO: CPR

122-115-108-696

## Tabla de medidas

Según el largo del antebrazo:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	30 cm - 35 cm
MEDIUM (M)	35 cm - 40 cm
LARGE (L)	40 cm - 45 cm
X-LARGE (XL)	+ 45 cm

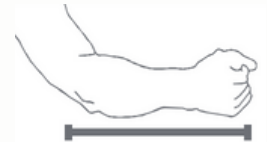

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Composición

- Interior y exterior: Poliéster 100%

## Instrucciones de Uso

1. Coloque el brazo dentro del cabestrillo
2. Pase una de las correas sobre el hombro contrario y la otra rodeando el torso a la altura de la cintura.
3. Ajuste las correas para proporcionar mejor fijación.

## Advertencias y Recomendaciones

No hay contraindicaciones, no se han reportado observaciones.

## Patologías

- Luxaciones y sub-luxaciones
- Fracturas
- Inflamación

## Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Azul
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Cabestrillo Pedriátrico / Pediatric Sling

CÓDIGO: CPT  
952-421

### Descripción y modo de acción

Diseño y tallas para los infantes. Brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. Alivia la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. De simple y rápida colocación. Cuenta con dos tiras regulables, una pasa por detrás de la espalda y otra sobre el hombro, junto a su sistema de cierre con abrojos, permiten ajustar el producto a la altura deseada según las necesidades del usuario. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Tabla de medidas

Según el largo del antebrazo

Tallas	(cm)
2 - 5 años	25 cm - 29 cm
6 - 11 años	30 cm - 34 cm



\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Composición

- Interior y exterior: Poliéster 100 %

### Instrucciones de uso

1. Coloque el brazo dentro del cabestrillo
2. Pase una de las correas sobre el hombro contrario y la otra rodeando el torso a la altura de la cintura.
3. Ajuste las correas para proporcionar mejor fijación

### Advertencias y Recomendaciones

No hay contraindicaciones, no se han reportado observaciones.

### Patologías

- Rotura de tendones.
- Luxaciones y sub-luxaciones.
- Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo.
- Inflamación.

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Celeste con diseño
Industria/Origen	Arequipa - Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Collarín Cervical Blando / Soft Cervical Collar

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte y calor terapéutico al cuello, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos, descargando el peso de la cabeza. Indicado para tratar dolencias de los músculos del cuello. Mantiene el cuello en posición neutra y limita moderadamente los movimientos de rotación, flexión y extensión. Sirve como complemento en la utilización de collares de inmovilización durante el período de sueño. Su sistema de cierre permite regular la compresión y adaptarse a la anatomía de cada usuario.

### Tabla de medidas

Según el circunferencia del cuello

Tallas	(cm)
SMALL (S)	31 cm - 36 cm
MEDIUM (M)	36 cm - 41 cm
LARGE (L)	41 cm - 46 cm
X-LARGE (XL)	+46 cm



\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: CBL

216-092-085-078-764

### Composición:

- Interior: Poliuretano 100%, D30
- Exterior: Algodón 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar el producto alrededor del cuello ubicando la parte ovalada hacia arriba, como apoyo del mentón y la cinta de velcro en la parte de atrás.
2. Ajuste ligeramente hasta encontrar la comodidad deseada.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias a nivel de la glotis agravadas durante el movimiento de extensión. Si se observan problemas de irritación de la piel o sensibilización, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Traumatismo leves de partes óseas (apófisis espinosas, transversas) y blandas (latigazo cervical).
- Postoperatorios, torticolis, cervicalgias, síndromes compresivos, enfermedades reumáticas y/o degenerativas.

### Empaque

Envase	Caja / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
Industria/Origen	Arequipa - Perú

## Inmovilizador de muñeca / Wrist Immobilizer

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte rígido a la muñeca, favoreciendo la recuperación de traumatismos, post-operatorios y post-fracturas. La inmovilización de la muñeca ayuda a la desinflamación del tendón medio. La varilla anatómica de aluminio evita movimientos de flexión o extensión de la articulación y se adaptan a la posición natural de la articulación, pudiendo readecuar su curvatura. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos de muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Las fuerzas multidireccionales aplicadas por el producto mantienen la articulación en una posición neutra. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. Su sistema de cierre con abrojos, permite ajustar el producto acorde al tratamiento indicado. El producto se presenta en dos variantes: para mano derecha y para mano izquierda.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: IMC

436-443

CÓDIGO: IMN

032-056

### Composición

- Interno y Externo: Poliéster 100 %
- Férula de Aluminio 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Introduzca la mano en el inmovilizador colocando el pulgar dentro del orificio lateral.
2. Verifique que la férula de aluminio quede en la palma de la mano.
3. Ajuste las correas hasta sentir un poco de presión. (Puede cortar el exceso de velcro)

### Advertencias y Recomendaciones

El tiempo de uso dependerá del tipo de lesión e indicación médica.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar al médico.

### Patologías

- Fracturas
- Esguinces
- Patologías articulares

### Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro / Beige
Industria/Origen	Arequipa -Perú



# Inmovilizador de dedo/ Finger immobilizer

CÓDIGO: IMD  
914-907

## Descripción y modo de acción

Indicado en casos de lesiones o traumatismos de falange y articulaciones interfalángicas. Brinda inmovilización y sujeción firme a los dedos de la mano, mediante una varilla de aluminio, que limita el movimiento y ayuda a mantener al dedo en una posición neutra. Ayuda a la recuperación de traumatismos o lesiones, además de brindar contención y calor terapéutico. El sistema de cierre con abrojos permite regular el ajuste del producto según las necesidades de tratamiento y anatomía de cada usuario. Su diseño permite el uso en cualquier dedo de la mano exceptuando el pulgar y meñique.

## Tabla de medidas

Según el largo del dedo

TALLAS	MEDIDAS(cm)
Small-Medium (S/M)	17 cm a menos
Large-X Large (L/XL)	18 cm a más

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



## Composición

- Interior : Policloropreno 100 %
- Exterior : Poliamida 100 % - Laminado /Mercerizado 100 %
- Varilla de aluminio

## Instrucciones

1. Desajustar los abrojos.
2. En caso de que el especialista indique flexionar la ballena, puede realizarlo aplicando la fuerza necesaria hasta llegar a la curvatura deseada.
3. Ubicar el dedo lesionado sobre la ballena haciendo coincidir la punta de la misma con la punta del dedo.
4. Acomodar el elástico corto sobre la mano y pegar el abrojo en la cara interna del elástico largo, la felpa sobre este último debe quedar visible.
5. Abrochar el abrojo superior alrededor de la punta del dedo.
6. Sujetar las tiras centrales de forma cruzada sobre la felpa del elástico.
7. Terminar de rodear la mano con el elástico hasta abrocharlo sobre sí mismo.
8. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

## Patologías

- Indicado en fracturas, luxaciones y más lesiones en los dedos.
- Ayuda a la inmovilización de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas
- Indicado para la enfermedad Dupuytren

## Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa /Perú





## Soporte de Hombro / Shoulder Support

### Descripción y modo de acción

Contribuye a la desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. Brinda soporte y estabilidad al hombro, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Aplica compresión moderada, logrando el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. Su peso ligero conforma un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos brazos.

### Tabla de medidas

Tallas	(cm)	Presentaciones
S - M	26 cm - 31 cm	Derecha - Izquierda
L - XL	32 cm - 38 cm	

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: SHI

506-520

CÓDIGO: SHD

490-513

### Composición

- Interior : Policloropreno 100%
- Exterior : Poliamida 100% - Laminado / Mercerizado 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros.
2. Ubicar las bandas según comodidad a través de los velcros.
3. Fijar las bandas con el velcro según la tensión deseada

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

### Patologías

- Traumatismo escápulo-humeral
- Traumatismo acromio-clavicular
- Bursitis de hombro
- Inestabilidad de la articulación
- Esguinces
- Tendinitis
- Artrosis
- Subluxaciones
- Dislocación del hombro

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa /Perú



# Corrector de Postura Completo / Complete Posture Corrector

## Descripción y modo de acción

Brinda corrección postural progresiva, y de esta manera ayuda a prevenir y tratar dolencias asociadas a la columna vertebral y los músculos de la espalda. Una mala postura puede derivar en graves trastornos físicos en diferentes partes del cuerpo, que a mediano y largo plazo pueden pronunciarse. El producto está compuesto por dos piezas que brindan sostén a los hombros y se ajustan en la zona abdominal, aplicando así la tensión y ajuste necesarios. La zona axilar posee tiras acolchadas, con el fin de evitar posibles molestias e irritaciones, permitiendo un uso cómodo a lo largo del día. Su sistema de ajuste y cierre permite regular el nivel de tensión que ejerce el producto.

## Tabla de medidas

Según circunferencia del torso superior:

Tallas	(cm)
JUNIOR (Jr)	menos de 75 cm
SMALL (S)	75 cm - 85 cm
MEDIUM (M)	85 cm - 95 cm
LARGEX (L)	95 cm - 105 cm
X-LARGE (XL)	más de 105 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

## Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: CPO

726-474-498-719

## Composición

- Interior y exteriores: Nylon 54 % - Poliéster 42 % - Elastano 4%

## Instrucciones de Uso

1. Separar las piezas, colocándolas individualmente en cada brazo.
2. Pasar las correas elásticas por la espalda cruzando una con la otra y ajustar suavemente en la parte de adelante del cuerpo, con el cierre tipo velcro, a la altura de la cintura.

## Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se presentan reacciones adversas se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

No se recomienda usar mientras se duerme.

## Patologías

- Sin patologías

## Empaque

<b>Envase</b>	Caja / Bolsa
<b>Cantidad</b>	1 unidad
<b>Color</b>	Beige
<b>Industria/Origen</b>	Arequipa - Perú

## Faja facial (Mentonera) / Facial Girdles

### Descripción y modo de acción

Gracias a su diseño de tres velcros, tiene dos funciones: ayuda a reducir la papada, adelgazar el mentón por la presión que la faja hace sobre el rostro y, además, ayuda también a mantener el mentón en una posición neutra, incrementando el espacio en las vías respiratorias para reducir las vibraciones, reduciendo sustancialmente el ronquido, ayudando a mejorar el descanso y niveles de oxígeno. Es ideal para cuando te haces una cirugía estética, ya sea en cuello o mentón, pues la presión mantiene la herida cubierta y a salvo de que se abra. La faja mentonera ayuda a reducir la papada, reafirmar y tonificar los tejidos del rostro. Es fácil de poner y quitar, se coloca en el contorno del rostro y se asegura con los velcros.

Diseñada con material suave que la vuelve muy cómoda y fresca. Tiene un diseño especial para el rostro, un espacio para que se coloque las orejas. Su uso no imposibilita hablar, beber ni respirar. La elasticidad del material permite adaptarse a la anatomía de cada usuario.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: FRF

945-938-155-877

### Tabla de medidas

Según circunferencia del rostro:

Tallas	(cm)
SMALL	55 cm - 60 cm
MEDIUM (M)	60 cm - 65 cm
LARGEX (L)	65 cm - 70 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Composición

- Interior y exterior : Poliamida 90 % - Elastano 10%

### Instrucciones de Uso

1. Colocar la faja al contorno de la mandíbula ajustando por detrás del cuello, nuca y parte occipital para darle mejor compresión .

### Advertencias y Recomendaciones

El tiempo de uso del producto, debe prescribirlo el médico.

Si se observan problemas de irritación de la piel o sensibilización, retirarlo y consultar al médico.

### Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Soporte de Maternidad / Maternity Support

CÓDIGO: SOM-  
665-672-689-285

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte moderado a la zona baja del vientre, ayudando a contener el peso del mismo, y a equilibrar el centro de gravedad de la mujer embarazada. Reduce la carga que se produce en la columna durante la gestación, aliviando dolores lumbares. Fabricada con elástico de mediana compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte. El elástico doble en su parte frontal permite contener adecuadamente al vientre, adaptándose a la anatomía de la usuaria. Su sistema de cierre con abrojo permite regular la compresión

### Tabla de medidas

Según circunferencia del vientre:

Tallas	(cm)
SMALL	88 cm - 93 cm
MEDIUM (M)	94 cm - 101 cm
LARGEX (L)	102 cm - 109 cm
X-LARGE (XL)	más de 110 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Materiales

- Interior y exterior: Nylon 54 % - Poliéster 42 % - Elastano 4%

### Instrucciones de Uso

1. Colocar el producto alrededor del vientre bajo con la parte más ancha adelante,
2. Sujetar con el cierre tipo velcro y ajustar hasta obtener un grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias, irritación en la piel y dificultar la circulación sanguínea.

Si se utiliza la faja adecuada no existe ninguna repercusión sobre el embarazo o el bebé.

Una compresión excesiva puede producir molestias en la respiración, o algún tipo de dificultad o esfuerzo durante el proceso.

El tiempo de uso del producto, debe prescribirlo el médico. Si se observan problemas de irritación de la piel o sensibilización, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
Industria/Origen	Arequipa -Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Faja de Colostomía / Colostomy Girdle

CÓDIGO: FCO

877-891-860-884

### Descripción y modo de acción

Brinda contención a la zona abdominal, ayudando a fijar la bolsa recolectora después de la cirugía haciendo que se proteja la zona abdominal si ésta ha quedado sensible tras la intervención quirúrgica.

La faja, gracias a su diseño ayuda a la prevención de hernias incisionales a través del estómago. Ideal para proteger el estómago y dispositivos de drenaje.

### Tabla de medidas

Según contorno de cintura

Tallas		(cm)
SMALL	(S)	66 cm - 83 cm
MEDIUM	(M)	75 cm - 92 cm
LARGEX	(L)	85 cm - 102 cm
X-LARGE	(XL)	95 cm - 112 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Composición

- Interior: Algodón 10 % - Poliéster 90 %
- Exterior: Nylon 54 % - Poliéster 42 % - Elastano 4%
- Barbillas de silicona 100 %

### Instrucciones de Uso

- Tener limpia la zona a colocar la faja **COVER**.
- Despegar el sistema velcro.
- Colocar en la zona abdominal.
- Ubicar el orificio en la zona inferior descendente o transversal.
- Antes de colocar la faja identificar la zona para una correcta ubicación.
- Regular con el cierre velcro para un ajuste suave o intermedio que brinde correcta sujeción

### Advertencias y Recomendaciones

El producto se debe utilizar solamente en pieles intactas. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilidad, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Colostomía

### Empaque

<b>Envase</b>	<b>Inserto / bolsa</b>
<b>Cantidad</b>	1 unidad
<b>Color</b>	Beige
<b>Industria/Origen</b>	Arequipa -Perú

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Faja Post Operatoria de Algodón / Post Operative Girdle

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte suave a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento asociados al área torácica y abdominal, en caso de post-operatorios de cirugía abdominal, dolores lumbares, fisuras costales, post-partos por cesárea e intervenciones estéticas. La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	72 cm - 82 cm
MEDIUM (M)	82 cm - 92 cm
LARGE (L)	92 cm - 102 cm
X-LARGE (XL)	102 cm - 112 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: FA2

276-269-252-382-993

CÓDIGO: FA3

894-900-917-924-986

### Composición

- Interior :Algodón 80 % - Espuma Poliéster 20 %
- Exterior : Algodón 55 % -Poliéster 45 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar alrededor de la cintura ajustando ligeramente con el sistema de cierre y ajuste de cintas velcro.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias a nivel del abdomen agravadas durante el movimiento de extensión.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilidad , retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

#### Faja de algodón de 20 cm

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
Industria/Origen	Arequipa /Perú

#### Faja de algodón de 30 cm

Envase	Inserto /Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
Industria/Origen	Arequipa /Perú



## Faja Post Operatoria Elástica / Elastic Post Operative Girdle

### Descripción

Brinda soporte firme a la zona media y alta del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al tórax. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. Fabricada con elásticos de alta compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. Su diseño curvo permite colocar la faja cómodamente bajo el busto. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

#### Faja elástica de 20 cm

Tallas	(cm)
SMALL (S)	60 cm - 77 cm
MEDIUM (M)	70 cm - 87 cm
LARGEX (L)	80 cm - 97 cm
X-LARGE (XL)	90 cm - 107 cm

#### Faja elástica de 27 cm

Tallas	(cm)
SMALL (S)	65 cm - 85 cm
MEDIUM (M)	70 cm - 90 cm
LARGEX (L)	75 cm - 95 cm
X-LARGE (XL)	80 cm - 100 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Patologías

- Sin patologías

Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: FE2

306-290-283-375

CÓDIGO: FE3

931-948-955-962

### Composición

- Exterior : Elastano 20 % - Goma elástica 40 % - Poliéster 40 %
- Interior : Algodón 80 % - Espuma Poliéster 20 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar alrededor de la cintura ajustando ligeramente con el sistema de cierre y ajuste con cintas velcro.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias a nivel del abdomen agravadas durante el movimiento de extensión.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Empaque

#### Faja elástica de 20 cm

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
Industria/Origen	Arequipa -Perú

#### Faja elástica de 27 cm

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
Industria/Origen	Arequipa -Perú



## Faja Soporte Lumbar / Lumbar Support Belt

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte en la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Cuenta con varillas de aluminio, en la parte posterior, que ayudan a una mejor postura, y bandas de ajuste laterales dispuestas en V, que parte desde la columna, hacia el abdomen, las cuales permiten una mayor compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	68 cm - 83 cm
MEDIUM (M)	74 cm - 89 cm
LARGEX (L)	80 cm - 95 cm
X-LARGE (XL)	86 cm - 101 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



CÓDIGO: FSN

292-308-315-322-339

CÓDIGO: FSB

238-221-214-245-193

### Composición

- Interior y exterior: Elastano 20 % - Goma elástica 40 % - Poliéster 40 %
- Varillas de aluminio 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar alrededor de la cintura ajustando ligeramente con el sistema de cierre y ajuste con cintas velcro.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias a nivel del abdomen agravadas durante el movimiento de extensión.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco / Negro
Industria/Origen	Arequipa -Perú



## Faja Soporte Lumbar Flexible / Flexible Lumbar Support Belt

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte en la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Cuenta con barbillas de silicona, en la parte posterior, que ayudan a una mejor postura, y bandas de ajuste laterales dispuestas en V, que parte desde la columna, hacia el abdomen, las cuales permiten una mayor compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	68 cm - 88 cm
MEDIUM (M)	74 cm - 94 cm
LARGEX (L)	80 cm - 100 cm
X-LARGE (XL)	86 cm - 106 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



**Fabricado por TOP CARE S.A.C.**

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: FSF

346-353-360-377-384

### Composición

- Interior y exterior: Elastano 20 % - Goma elástica 40 % - Poliéster 40 %
- Barbillas de Silicona 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar alrededor de la cintura.
2. Ajustar el velcro principal y luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

Una compresión excesiva puede producir molestias a nivel del abdomen agravadas durante el movimiento de extensión.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Inserto / Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Antifaz 3D y Tapones Blandos / 3D Mask and Soft Plugs

CÓDIGO: AYT  
469

### Descripción

Está diseñado para proteger los ojos bloqueando la luz para un descanso óptimo, relajando la pupila y los músculos oculares, los Tapones Auditivos Cover reducen considerablemente el ruido, adaptándose suavemente a la cavidad auricular, haciendo su descanso más completo. El Antifaz y tapones blandos Cover gracias a su diseño ergonómico hace que se adapten perfectamente al contorno sin presionar tus ojos.

### Tabla de medidas

Tallas
Única - Regulable Unisex

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Composición

- Poliéster 95 % - Látex 5%
- Poliuretano 100% -Espuma expansible antialérgica, 100% libre de PVC.

### Instrucciones de Uso

1. Desabrochar los velcros.
2. Ubicar el antifaz a la altura del tabique.
3. Ajustar los elásticos por encima de las orejas.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort..

### Advertencias y Recomendaciones

No se han reportado casos que contraindiquen su uso libre.

### Patologías

- Migraña
- Insomnio

### Empaque

Envase	Caja / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa -Perú

**Fabricado por TOP CARE S.A.C.**

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Tapones con cordón / Cord Caps

CÓDIGO: TCC

134

### Descripción y modo de acción

Están diseñados para reducir considerablemente el ruido, adaptándose suavemente a la cavidad auricular. Indicado para reducir el sonido externo que perturba.

Los tapones con cordón, gracias a su composición de superficie lisa es resistente a la suciedad. Además, ayuda a evitar la pérdida de audición y el tinnitus (zumbido en los oídos). El cordón permite la facilidad de extracción. Ayuda a una reducción de ruido 29 dB.

### Tabla de medidas

Tallas	(cm)
Única	-

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



### Composición

- Interior y exterior : Poliuretano 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Manjar los tapones siempre con las manos limpias.
2. Insertar en el oído.
3. Enrollar con los dedos los cordones.
4. Presionar con el dedo y verificar si esta colocado adecuadamente mediante un espejo.

### Advertencias y Recomendaciones

Si se presentan reacciones adversas (como dolor de cabeza) se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Naranja
Industria/Origen	Arequipa - Perú

**Fabricado por TOP CARE S.A.C.**

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe





## Cojín Lumbar / Lumbar Cushion

CÓDIGO: CLU  
467

### Descripción y modo de accion

Es un artículo para asientos de oficina, vehículos o en el hogar. Mantiene la curvatura ideal de las vértebras, logrando una correcta posición al permanecer largos periodos sentado. Mantiene el calor apropiado en la espalda evitando dolores.

El cojín lumbar está diseñado para reducir la presión sobre la parte baja de la espalda, colocando la columna vertebral en una posición más saludable para nuestro cuerpo. Además, ayuda a prevenir la fatiga y la tensión muscular, es ideal ya que proporciona comodidad y alivio a reacciones de sentarse por periodos extensos.

### Tabla de medidas

Tallas	(cm)
Única	Largo - Ancho 36 cm

### Colores

- Negro
- Azul
- Plomo
- Rojo

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Díez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición

- Interior : Poliuretano 100 %
- Exterior: Poliéster 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Colocar el cojín lumbar en el respaldo del asiento
2. Pasar las correas elásticas por detrás del mismo para una mejor fijación.

### Advertencias y Recomendaciones

Si se presentan reacciones adversas discontinuar su uso y consultar a su médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Inserto
Cantidad	1 unidad
Color	Azul-negro-plomo
Industria/Origen	Arequipa -Perú

## Tapones auditivos / Earplugs

### Descripción y modo de acción

Están diseñados para reducir considerablemente el ruido, adaptándose suavemente a la cavidad auricular. Elaborados con material antialérgico, ideal para viajes largos.

Los tapones ayudan a reducir el sonido externo que perturba e impide un descanso reparador. Ideal para viajes largos. Además, ayuda a evitar la pérdida de audición y el tinnitus (zumbido en los oídos).

### Tabla de medidas

Tallas	(cm)
Única	-

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

**Dirección:**

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

**Correo y Teléfonos:**

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

**Sitio web:** www.cover.pe



CÓDIGO: TAU  
643

### Composición

- Interior y exteriores : Espuma expansible antialérgica, 100% libre de PVC.

### Instrucciones de Uso

1. Separa ambos tapones
2. Insertar en el oído uno por uno
3. Presionar con el dedo y verificar si esta colocado adecuadamente mediante un espejo.

### Advertencias y Recomendaciones

Si se presentan reacciones adversas (como dolor de cabeza) se recomienda discontinuar su uso y consultar a su médico.

### Patologías

- Sin patologías

### Empaque

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Varios
Industria/Origen	Arequipa -Perú



## Faja Laboral Liviana / Light Work Girdle

CÓDIGO: FLL

223-230-247-254-261

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco, protegiendo los músculos de la zona lumbar. Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones causadas por el levantamiento de cargas. Se recomienda su uso durante la realización de tareas que impliquen levantamiento de peso, ya que se genera una sobre exigencia en los músculos de la zona sacrolumbar. La faja disminuye la carga sobre estos músculos, aliviando traumatismos y distensiones en los mismos, y previniendo futuras lesiones.

La faja, cuenta con cuatro varillas de PVC, que ayudan a una mejor postura. Los tirantes aseguran que la faja se mantenga en su correcta ubicación, y funcionan como sostén cuando la faja es desajustada, en los momentos que no se requiera su uso. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada usuario. Lleva cintas reflectivas de seguridad.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	56 cm - 76 cm
MEDIUM (M)	66 cm - 86 cm
LARGEX (L)	76 cm - 96 cm
X-LARGE (XL)	86 cm - 106 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición

- Interior y exterior: Elastano 20 % - Goma elástica 40 % - Poliéster 40 %
- Varillas de PVC 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros.
2. Colocar los tirantes sobre los hombros y ajustarlos a su medida de modo tal que pueda colocarse la faja en la zona baja de la columna.
3. Ajustar el velcro principal y luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Luego ajustar ligeramente la faja alrededor de la cintura con el sistema velcro.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado optimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

El producto se debe utilizar solamente en pieles intactas. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Lumbalgia, ciática.
- Lesiones en músculos de espalda.
- Profilaxis laboral

### Empaque

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Faja Laboral Pesada / Heavy Work Girdle

CÓDIGO: FLP

580-597-603-740

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco, protegiendo los músculos de la zona lumbar. Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones causadas por el levantamiento de cargas. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Se recomienda su uso durante la realización de tareas que impliquen levantamiento de peso, ya que se genera una sobre exigencia en los músculos de la zona sacrolumbar. La faja disminuye la carga sobre estos músculos, aliviando traumatismos y distensiones en los mismos, y previniendo futuras lesiones.

La faja, cuenta con seis varillas de PVC, que ayudan a una mejor postura. Los tirantes aseguran que la faja se mantenga en su correcta ubicación, y funcionan como sostén cuando la faja es desajustada, en los momentos que no se requiera su uso. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada usuario. Lleva cintas reflectivas de seguridad.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	70 cm - 97 cm
MEDIUM (M)	75 cm - 103 cm
LARGEX (L)	85 cm - 112 cm
X-LARGE (XL)	93 cm - 120 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: [www.cover.pe](http://www.cover.pe)



### Composición

- Interior y exterior: Elastano 20 % - Goma elástica 40 %  
- Poliéster 40 %
- Varillas de PVC 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros.
2. Colocar los tirantes sobre los hombros y ajustarlos a su medida de modo tal que pueda colocarse la faja en la zona baja de la columna.
3. Ajustar el velcro principal y luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Luego ajustar ligeramente la faja alrededor de la cintura con el sistema velcro.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado optimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

El producto se debe utilizar solamente en pieles intactas. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Lumbalgia, ciática.
- Lesiones en músculos de espalda.
- Profilaxis laboral

### Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú



## Faja Lumbar Ovalada / Oval Lumbar Belt

CÓDIGO: FLO

100-063-070-087-094

### Descripción y modo de acción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco, protegiendo los músculos de la zona lumbar. Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones causadas por el levantamiento de cargas. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Se recomienda su uso durante la realización de tareas que impliquen levantamiento de peso, ya que se genera una sobre exigencia en los músculos de la zona sacrolumbar. La faja disminuye la carga sobre estos músculos, aliviando traumatismos y distensiones en los mismos, y previniendo futuras lesiones.

La faja, cuenta con dos varillas de PVC y ocho barbillas, que ayudan a una mejor postura. Los tirantes aseguran que la faja se mantenga en su correcta ubicación, y funcionan como sostén cuando la faja es desajustada, en los momentos que no se requiera su uso. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada usuario.

### Tabla de medidas

Según circunferencia de la cintura:

Tallas	(cm)
SMALL (S)	83 cm - 98 cm
MEDIUM (M)	88 cm - 103 cm
LARGEX (L)	94 cm - 109 cm
X-LARGE (XL)	100 cm - 115 cm

\*Los valores de esta tabla representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla. La medida máxima incluye lo que puede llegar a estirar en uso

### Modo de lavado y Almacenamiento

- Para una mejor conservación guardar en su empaque.
- Lavar a mano. Lavar con jabón o detergente suave, no usar blanqueadores. Secar a la sombra. No planchar. No retorcer.



Fabricado por TOP CARE S.A.C.

Empresa con Certificación en Gestión de Calidad según norma ISO 9001.

#### Dirección:

Urb. Diez Canseco B'5. J.L.B. y R. Arequipa-Perú

#### Correo y Teléfonos:

ventas@cover.pe

(054) 431534 - 956 467 546

Sitio web: www.cover.pe



### Composición

- Interior: Espuma Poliéster 100% - 100% algodón
- Exteriores: 100% Drill Poliéster - Elastano 20 % - Goma elástica 40 % - Poliéster 40 %
- Varillas de PVC 100 % - Barbillas de silicona 100 %

### Instrucciones de Uso

1. Despegar los velcros.
2. Colocar los tirantes sobre los hombros y ajustarlos a su medida de modo tal que pueda colocarse la faja en la zona baja de la columna.
3. Ajustar el velcro principal y luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Luego ajustar ligeramente la faja alrededor de la cintura con el sistema velcro.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado optimo de confort.

### Advertencias y Recomendaciones

El producto se debe utilizar solamente en pieles intactas. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

Si se observan problemas de irritación de la piel, sensibilización y citotoxicidad por los materiales constructivos, retirarlo y consultar al médico.

### Patologías

- Lumbalgia, ciática.
- Lesiones en músculos de espalda.
- Profilaxis laboral

### Empaque

Envase	Inserto / Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
Industria/Origen	Arequipa - Perú